

CURADH-Safe®

SERINGA

com sistema de segurança retrátil

Em conformidade com a Lei Federal nº 9.273/1996 e com as diretrizes da NR-32

A Curadh-Safe® incorpora um sistema de segurança retrátil desenvolvido para impedir a reutilização da seringa após o acionamento do mecanismo, em conformidade com a Lei Federal nº 9.273/1996. Associada às práticas de prevenção previstas pela NR-32, essa tecnologia contribui para uma rotina mais segura, reduzindo a exposição a materiais perfurocortantes e reforçando a proteção dos profissionais de saúde.



Desenvolvida para oferecer mais segurança, precisão e eficiência na administração de medicamentos, a seringa combina tecnologia NO GAP, conexão Luer Lock, cilindro transparente com escala de fácil leitura e êmbolo de deslizamento suave. O sistema de segurança retrátil protege a agulha após o uso, impede a reutilização e, aliado ao design otimizado, contribui para um descarte mais eficiente e para a redução do volume de resíduos perfurocortantes.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNIDADE	UNIDADE P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNIDADE P/ CAIXA
1200061MB	Seringa de segurança NO GAP	3 ml	3000	100
1200071MB	Seringa de segurança NO GAP	5 ml	2400	100
1200081MB	Seringa de segurança NO GAP	10 ml	1200	100
1200091MB	Seringa de segurança NO GAP	20 ml	800	100

Anel de silicone que evita o acionamento acidental

A Curadh-Safe é bem simples de se utilizar: Veja o passo a passo a seguir




1 Abra a embalagem da seringa com a técnica correta (pétala);



2 Conecte a agulha para realizar a aspiração e dê uma volta completa para encaixá-la;



3 Realize a aspiração da solução, eliminando bolhas de ar se necessário;

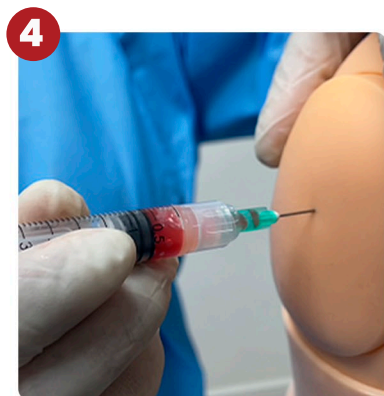

4 Para técnica IM: basta realizar a aplicação total do conteúdo da seringa.



5 Após escutar o primeiro "click", a agulha já estará pronta para ser retraída.



6 Puxe o êmbolo, para que a agulha entre completamente dentro da seringa;



7 Ative a segunda trava de segurança, puxando o êmbolo até ouvir o segundo "click";



8 Proceda com a quebra do êmbolo;



9 Faça o descarte do perfurocortante em seu local adequado e a haste no lixo comum.

Importado por:

CURADH COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTA.

Rua Manuel Antônio Gomes, 162, GP 01 - B. Jordanésia - Cajamar/SP - CEP: 07776-410 -

CNPJ: 34.907.123/0001-22 SAC: (11) 5182-5366 Responsável Técnico: NEDEIR JOAQUIM ALMEIDA - CRF 97011/SP

REGISTRO ANVISA RMS nº: 81976230001

CURADH®